



Український виробник

LAPOMED®

ЛАПАРОСКОПІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ

2024

Вау!

Це так круто, що Вам в руки потрапив наш друкований каталог лапароскопічних інструментів, якими ми дійсно пишаємось 😊

Це просто чудова нагода нам із Вами познайомитись та побудувати дійсно комфортні та приємні партнерські стосунки, адже нам є що запропонувати окрім самого товару та ультрашвидких прорахунків Ваших проектів:

🛡️ гарантія, яка дійсно працює 🚚 відправка день-в-день
🧐 професійний супровід ⭐ система управління якістю
📁 зберігання у файних контрольованих умовах




Зміст каталогу

с. 1



Голки

с. 2-3

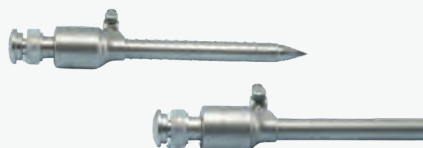

Троакари

с. 4



Голкотримачі

с. 5



Електроди

с. 6



Біполярні затискачі

с. 7-11



Монополярні затискачі

с. 12




Кліпси та аплікатори

с. 13



Лапароскопи

с. 14

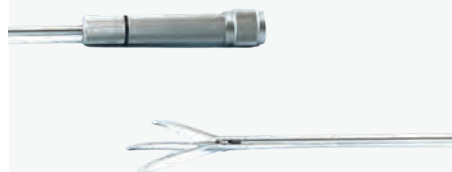


Ретрактори

с. 15



**Трубки, штовхачі
лігатур**

с. 15

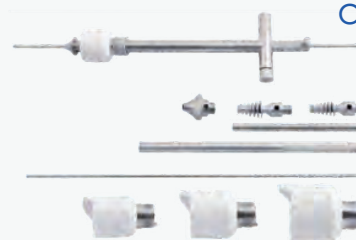

Маткові маніпулятори

с. 16



Витратні матеріали

Голки лапароскопічні

Лапароскопічні голки використовуються для різних маніпуляцій під час лапароскопічної операції, а саме:

Голка Вереша - це голка, що призначена для першого проколу черевної порожнини в області пупка для подальшого введення газу та створення пневмоперитонеуму. Голка Вереша обладнана спеціальним пружинним механізмом, який прикриває лезо голки після проходження у черевну порожнину. Голка Вереша є незамінним інструментом для тих, хто починає оперувати лапароскопічно.

Голка для пункції - призначена для проколу та подальшого забору чи подачі рідини у порожнисті структури, наприклад, жовчного міхура. Зазвичай лапароскопічні голки для пункції з проксимальної сторони мають з'єднання типу Люер для підключення трубок та шприців.

Голка для ушивання ран - це лапароскопічний інструмент призначений для проколу і багат шарового шиття розрізів після лапароскопічних втручань. За своїм принципом роботи нагадує скорняжну голку та має механізм захоплення нитки під контролем лапароскопа.

Багаторазова голка Вереша



Артикул: LPM-0702.1 **Артикул:** LPM-0702.3
Діаметр: 2,5 мм Діаметр: 2,0 мм
Довжина: 140 мм Довжина: 140 мм

Артикул: LPM-0702.2 **Артикул:** LPM-0702.4
Діаметр: 2,5 мм Діаметр: 2,0 мм
Довжина: 120 мм Довжина: 120 мм

Одноразова голка Вереша



Артикул: LPM-1607.1
Діаметр: 2,0 мм
Довжина: 120 мм

Артикул: LPM-1607.3
Діаметр: 2,0 мм
Довжина: 150 мм



Перевагою одноразових голок є те, що їх канюля виготовлена з прозорого пластику, що дозволяє візуально підтвердити потрапляння в черевну порожнину.

Багаторазові голки, в свою чергу, можна автоклавувати, а простота та надійність конструкції дозволяє використовувати їх протягом довгого часу.

Троакари одноразові лапароскопічні

Троакар лапароскопічний – це інструмент доступу, який дозволяє створити тимчасове сполучення між черевною порожниною та зовнішнім середовищем для подальшого введення лапароскопічних інструментів.

Внутрішній діаметр троакара повинен відповідати зовнішньому діаметру лапароскопічного інструмента, який вводиться.

Особливість одноразових троакарів полягає в універсальному клапані, який дозволяє вводити інструменти будь-якого діаметру, не більшого за діаметр такого троакару. Наприклад, в одноразовий троакар 12 мм можна ввести інструмент діаметром 3 мм, 5 мм, 10 мм та 12 мм.



∅
5 мм
10 мм
12 мм

Із захищеним лезом

Довжина: 100/110 мм

Тип "Краун"

LPM-1601.1 - Ф5,5 x 110 мм
LPM-1601.2 - Ф10,5 x 100 мм
LPM-1601.3 - Ф12,5 x 110 мм



∅
5 мм
10 мм
12 мм

Безлезовий

Довжина: 100/110 та 150 мм

Тип "Краун"

LPM-1602.3 - Ф5,5 x 110 мм
LPM-1602.4 - Ф10,5 x 100 мм
LPM-1602.5 - Ф12,5 x 110 мм
LPM-1602.13 - Ф5,5 x 150 мм
LPM-1602.14 - Ф10,5 x 150 мм
LPM-1602.15 - Ф12,5 x 150 мм



∅
5 мм
10 мм
12 мм

Оптичний троакар

Довжина: 100/110 мм

Тип "Краун"

LPM-1605.1 - Ф5,5 x 100 мм
LPM-1605.2 - Ф10,5 x 110 мм
LPM-1605.3 - Ф12,5 x 110 мм

Прозорий обтуратор
для ендоскопа

Троакари багаторазові лапароскопічні

У багаторазових троакарів немає універсального клапана, але можна користуватись перехідниками для тих самих цілей. Наприклад перехідник з 10 мм на 5 мм. Усі перехідники зменшують діаметр троакара. Для всіх типів троакарів обов'язково необхідно замінювати хоча б раз на місяць силіконові ковпачки. Для троакарів з силіконовим клапаном хоча б раз на місяць необхідно замінювати клапан.



Із магнітним клапаном

Довжина: 95 мм

Пірамідний, гладкий

LPM-0701.3 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.4 - $\Phi 10/10,5$ мм

Пірамідний, з фіксацією

LPM-0701.10 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.11 - $\Phi 10/10,5$ мм

Безпечний, гладкий

LPM-0701.1 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.2 - $\Phi 10/10,5$ мм

Безпечний, з фіксатором

LPM-0701.8 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.9 - $\Phi 10/10,5$ мм



Із силіконовим клапаном

Довжина: 95 мм

Пірамідний, з фіксацією

LPM-0701.15 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.16 - $\Phi 10/10,5$ мм
LPM-0701.17 - $\Phi 12/10,5$ мм

Безпечний, гладкий

LPM-0701.5 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.6 - $\Phi 10/10,5$ мм
LPM-0701.7 - $\Phi 12/10,5$ мм

Безпечний, з фіксатором

LPM-0701.12 - $\Phi 5/5,5$ мм
LPM-0701.13 - $\Phi 10/10,5$ мм
LPM-0701.14 - $\Phi 12/10,5$ мм

Перехідники та ковпачки

для введення 5 мм інструменту
в 10 мм троакар

Тип вставка ("ромашка")

Артикул / довжина

LPM-0701.20 - 30 мм
LPM-0701.21 - 50 мм
LPM-0701.23 - 95 мм
LPM-0701.24 - 120 мм
LPM-0701.25 - 160 мм

Тип вставка ("ромашка")

не відкриває клапан

Артикул / довжина

LPM-0701.19 - 20 мм

Тип накидний

не відкриває клапан

Артикул: LPM-0701.26

Силіконові ковпачки

LPM-0701.30 - 5 мм
LPM-0701.29 - 10 мм

Силіконові клапани

LPM-0701.28 - 5 мм
LPM-0701.27 - 10 мм

Голкотримачі лапароскопічні

Лапароскопічний голкотримач – це інструмент для шиття та маніпуляцій голкою під час лапароскопічної операції. Усі лапароскопічні голкотримачі відрізняються між собою:

- по-перше, формою ручки, яка може бути у формі пістолета, прямою, V-подібною тощо;
- по-друге, формою носика/наконечника, яка може бути прямою або вигнутою в один з боків.

Усі професійні лапароскопічні голкотримачі мають на своєму кінці твердосплавні пластини, що значною мірою подовжують строк роботи голкотримача.

Ще однією важливою особливістю лапароскопічного голкотримача є його кремальєра, яка дозволяє фіксувати затиснуті бранші у необхідному положенні, зменшуючи навантаження на кисть хірурга.

Ручка “дельфін” прямі бранші



- Артикул: LPM-0706.6
- Діаметр: 5 мм
- Довжина: 330 мм
- Кремальєра: постійна
- Для правші/шульги

Ручка “дельфін” вигнуті бранші



- Артикул: LPM-0706.7
- Діаметр: 5 мм
- Довжина: 330 мм
- Кремальєра: постійна
- Для правші

Ручка “V”-подібна вигнуті бранші



- Артикул: LPM-0706.1
- Діаметр: 5 мм
- Довжина: 330 мм
- Кремальєра: постійна
- Для правші/шульги

Ручка “V”-подібна вигнуті бранші



- Артикул: LPM-0706.2
- Діаметр: 5 мм
- Довжина: 330 мм
- Кремальєра: постійна
- Для правші

Електроди коагуляційні лапароскопічні

Лапароскопічний електрод – це інструмент, призначений для коагуляції та різки під час лапароскопічної операції. Це незамінний лапароскопічний інструмент, наприклад, під час лапароскопічної холецистектомії.

Усі лапароскопічні електроди відрізняються за формою наконечника, яка може бути:

- Лапароскопічний гачок;
- Лапароскопічний шарик/кулька;
- Лапароскопічна лопатка;



Багаторазові електроди

Діаметр: 5 мм
Довжина: 330 мм
Коагуляція: монополярна
Наконечник: **керамічний**



Одноразові електроди

Діаметр: 5 мм
Довжина: 330 мм
Коагуляція: монополярна
Наконечник: **пластиковий**

Електрод типу "гачок"



Артикул: LPM-E-01

Електрод типу "кулька"



Артикул: LPM-E-02

Електрод типу "лопатка"



Артикул: LPM-E-04

Електрод типу "гачок"



Артикул: LPM-1702.5

Електрод типу "кулька"



Артикул: LPM-1702.2

Електрод типу "лопатка"



Артикул: LPM-1702.4

Біполярні маніпулятори лапароскопічні

Лапароскопічний біполяр (біполярний затискач або біполярний дисектор) – це незамінний інструмент під час будь-якої лапароскопічної операції, який дозволяє коагулювати без колатерального термічного ефекту, чим робить таку коагуляцію значно безпечнішою. Усі лапароскопічні біполярні відрізняються між собою формою бранші, яка може бути у вигляді затискача (ендограспера) або дисектора (типу Меріленд, типу Келлі, тощо). Також біполярні лапароскопічні маніпулятори можуть бути як одноразовими, так і багаторазовими.

134°C / 2 бари

Автоклавування



Кабель
біполярний
LPM-C-031



Багаторазові біполярні інструменти

Діаметр: 5 мм / Довжина: 330 мм / Коагуляція: біполярна


*Можна замовляти вставки, тубуси та ручки окремо.
Без кабелю в комплекті*

Дисектор Меріленд




Артикул: LPM-A5-3021

Затискач вікончатий

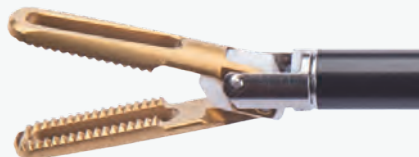

Артикул: LPM-A5-3011

Кабель з 2 штекерами
по 4 мм в комплекті

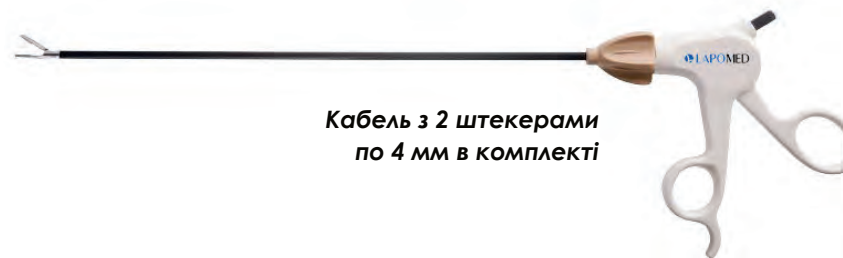

Одноразові біполярні інструменти

Діаметр: 5 мм
Довжина: 330 мм
Коагуляція: біполярна

Дисектор Меріленд



Артикул: LPM-1703.1

Затискач вікончатий



Артикул: LPM-1703.2

Одноразові монополярні маніпулятори

Одноразові лапароскопічні монополярні інструменти стають все більше популярними в Україні останнім часом через ряд переваг над багаторазовими відповідниками, а саме:

- Кожну операцію новий інструмент: якість інструменту гарантована та стабільна, адже усі одноразові інструменти проходять тести на витривалість, що в 5-10 разів перевищують потребу на 1 операцію.
- Стерильність найвищої якості: усі інструменти проходять потужну стерилізацію етилен оксидом, що має найкращу летючість та проникає у найдрібніші отвори та гарантує високу якість стерилізації. Ви відкриваєте нове пакування на кожну операцію, що має стерильний готовий до роботи інструмент.
- Економічна ефективність: якщо порахувати витрати на роботу персоналу з миття, дезінфекції, стерилізації, вартість витратних рідин та агентів, а також на воду та електроенергію, то часто стає набагато вигідніше брати одразу новий та стерилізований інструмент.

Діаметр 5 мм



Затискач за Йоханом 22 мм

330 мм, без кремальєри

Артикул: LPM-1704.41

330 мм, з кремальєрою:

Артикул: LPM-1704.42



Затискач хвилястий

330 мм, без кремальєри

Артикул: LPM-1704.53

330 мм, з кремальєрою:

Артикул: LPM-1704.54



Затискач типу "кіготь"

330 мм без кремальєри

Артикул: LPM-1704.57

330 мм з кремальєрою

Артикул: LPM-1704.58



Затискач типу Бабкок

330 мм без кремальєри

Артикул: LPM-1704.37

330 мм з кремальєрою

Артикул: LPM-1704.38



Затискач за Йоханом 40 мм

330 мм без кремальєри

Артикул: LPM-1704.65

330 мм з кремальєрою

Артикул: LPM-1704.66



Ножиці за Метценбаумом

330 мм без кремальєри

Артикул: LPM-1704.3

450 мм без кремальєри

Артикул: LPM-1704.4



Кабель монополярний
НЕ ВХОДИТЬ В КОМПЛЕКТ
Артикул: LPM-1705.1

Одноразові монополярні маніпулятори



Дисектор Меріленд

330 мм, без кремальєри
Артикул: LPM-1704.13
 450 мм, без кремальєри:
Артикул: LPM-1704.15



Затискач "качиний дзьоб"

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.61
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.62



Фенестрований 22 мм

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.45
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.46



Затискач атравматичний

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.33
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.34



Затискач за Алісом

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.21
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.22



Затискач за Йоханом 40 мм

330 мм, без кремальєри
Артикул: LPM-1704.49
 330 мм, з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.50
 450 мм, з кремальєрою:
Артикул: LPM-1704.52




Затискач для захоплення

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.29
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.30
 450 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.32



за Йоханом, фенестрований

330 мм без кремальєри
Артикул: LPM-1704.25
 330 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.26
 450 мм з кремальєрою
Артикул: LPM-1704.28

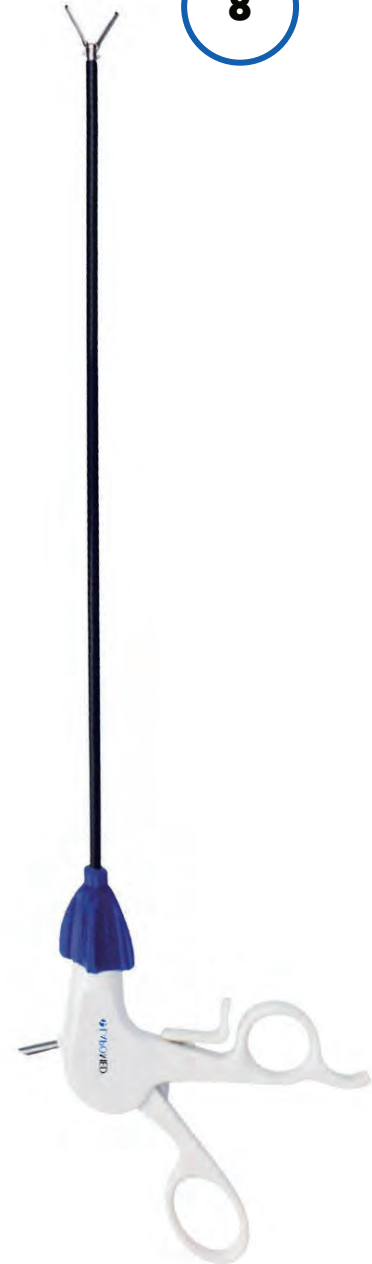

Багаторазові монополярні маніпулятори



134°C / 2 бари

Автоклавування

Лапароскопічні монополярні інструменти – це важливий і популярний інструмент у будь-якій лапароскопічній операційній бригаді. Усі лапароскопічні маніпулятори можна поділити на:

- Лапароскопічний затискач;
- Лапароскопічний дисектор;
- Лапароскопічні ножиці;

При цьому лапароскопічні затискачі можна поділити на травматичні (ті, що пошкоджують тканини) та атравматичні (ті, що не пошкоджують тканини).



1




2



3



Спільні складові частини (ручки сумісні з тубусами/вставками 5 та 10 мм)

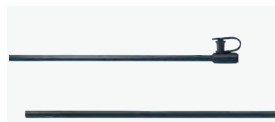


Тубус монополярний

Розмір: 5 x 360 мм
 Артикул: LPM-T5-301
 Розмір 10 x 360 мм
 Артикул: LPM-T0-301



Ручка монополярна
 без кремальєри
 Артикул: LPM-H550

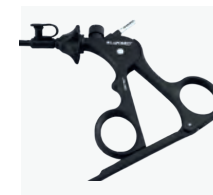

Ручка монополярна
 з кремальєрою
 Артикул: LPM-H551

Вставки для тубусів 5 x 360 мм



Дисектор за Келлі типу Меріленд

Бранші: 22 мм
 Артикул: LPM-I5-3023



Прямий дисектор, атравматичний

Бранші: 23 мм
 Артикул: LPM-I5-3043



Дисектор за Келлі, типу Меріленд

Бранші: 16 мм
 Артикул: LPM-I5-3013

Багаторазові монополярні маніпулятори

Вставки для тубусів 5 x 360 мм



Дисектор, вигнутий вправо
Бранші: 16 мм
Артикул: LPM-I5-3123



Атравматичний затискач
Бранші: 24 мм
Артикул: LPM-I5-3633



Затискач за Кроче-Олмі (лижа)
Бранші: 27 мм
Артикул: LPM-I5-3453



Кишковий затискач, фенестрований
Бранші: 37 мм
Артикул: LPM-I5-3303



Затискач атравматичний
Бранші: 22 мм
Артикул: LPM-I5-3333



Затискач за Бабкоком
Бранші: 18 мм
Артикул: LPM-I5-3553



Кишковий затискач фенестрований
Бранші: 18 мм
Артикул: LPM-I5-3213



Затискач для маткових труб
Бранші: 13 мм
Артикул: LPM-I5-3583



Спайковий затискач за Ванкейлї
Бранші: 15 мм
Артикул: LPM-I5-3493



Затискач типу "качиний дзьоб"
Бранші: 14 мм
Артикул: LPM-I5-3283



Атравматичний затискач
Бранші: 24 мм
Артикул: LPM-I5-3633



Затискач 2x4 зубчики
Бранші: 14 мм
Артикул: LPM-I5-3393



Затискач "тигровий" 2x4 зубчики
Бранші: 14 мм
Артикул: LPM-I5-3363



Затискач типу "алігатор"
Бранші: 18 мм
Артикул: LPM-I5-3773



Біопсійний затискач за Манесом
Бранші: 15 мм
Артикул: LPM-I5-3903

Багаторазові монополярні маніпулятори

Вставки для тубусів 5 x 360 мм



**Затискач за ДеБейкі
(судинний)**
Бранші: 31 мм
Артикул: LPM-I5-3813



**Ножиці
за Метценбаумом**
Бранші: 20 мм
Артикул: LPM-I5-3012



**Кабель
монополярний**
Артикул: LPM-C-030

Вставки для тубусів 10 x 360 мм



**Дисектор, вигнутий
вправо**
Бранші: 26 мм
Артикул: LPM-I0-3133



**Дисектор
атравматичний**
Бранші: 43 мм
Артикул: LPM-I0-3103



**Затискач за
Бейкоком**
Бранші: 34 мм
Артикул: LPM-I0-3573



**Зубчастий затискач
2x3 зубчики**
Бранші: 35 мм
Артикул: LPM-I0-3413



**Затискач
за Савале**
Бранші: 34 мм
Артикул: LPM-I0-3423



**Ложкоподібний
затискач**
Бранші: 32 мм
Артикул: LPM-I0-4883




**Зубчастий затискач,
короткий 2x3 зубчики**
Бранші: 21 мм
Артикул: LPM-I0-3403



Кабель монополярний
Артикул: LPM-C-030

Кліпси титанові та кліпатори (аплікатори)

Дошвина: 330 мм

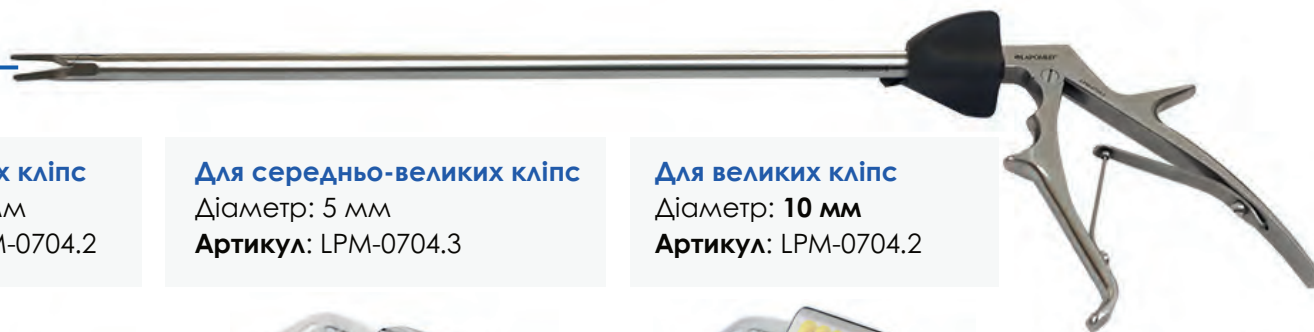

Для маленьких кліпс

Діаметр: 5 мм

Артикул: LPM-0704.1



Для середніх кліпс

Діаметр: 5 мм

Артикул: LPM-0704.2



Для середньо-великих кліпс

Діаметр: 5 мм

Артикул: LPM-0704.3



Для великих кліпс

Діаметр: 10 мм

Артикул: LPM-0704.2



Маленькі кліпси титанові

Лігування: 4 мм

Артикул: LPM-0601

Середні кліпси титанові

Лігування: 5 мм

Артикул: LPM-0602

Середньо-великі кліпси титанові

Лігування: 7 мм

Артикул: LPM-0603

Великі кліпси титанові

Лігування: 10 мм

Артикул: LPM-0604

Кліпатори для відкритого доступу

Для середньо-великих титанових кліпс

Бранші: 28 мм

Артикул: LPM-0704.9


Для маленьких титанових кліпс

Бранші: 18\28 мм

Артикул: LPM-0704.7



Ендокліпатори для полімерних кліпс

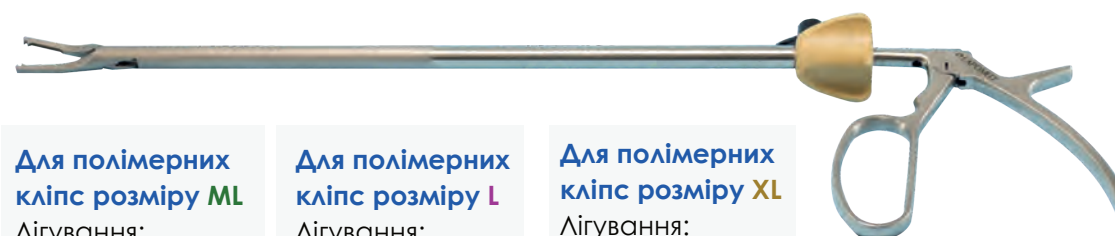

Для полімерних кліпс розміру ML

Лігування: 3-10 мм

Артикул: LPM-0710.3

Для полімерних кліпс розміру L

Лігування: 5-13 мм

Артикул: LPM-0710.2

Для полімерних кліпс розміру XL

Лігування: 7-16 мм

Артикул: LPM-0710.1

Лапароскопи (жорсткі ендоскопи)

Лапароскопи (др.-греч. λαπάρα — пах, черево + др.-греч. σκοπέω — дивлюсь) - це жорсткі ендоскопи, що використовуються у лапароскопічній хірургії для передачі візуальної інформації на голівку ендоскопічної камери, а також для подачі світла від освітлювача (генератора світла) у черевну порожнину. Лапароскопи HD мають більшу пропускну здатність лінз, чим забезпечують більше чітке та деталізовано зображення.



Поле огляду: 65°

Довжина 325 мм

HD

Лапароскопи, що не автоклавуються

Лапароскоп 10 мм

0 градусів

HD, не автоклав

Артикул: LPM-1801.1

Лапароскоп 10 мм

30 градусів

HD, не автоклав

Артикул: LPM-1801.2

Лапароскоп 5 мм

0 градусів

HD, не автоклав

Артикул: LPM-1801.3

Лапароскоп 5 мм

30 градусів

HD, не автоклав

Артикул: LPM-1801.4

Лапароскопи, що автоклавуються

Лапароскоп 10 мм

0 градусів

HD, 134°C, 2.2 бар

Артикул: LPM-1801.5

Лапароскоп 10 мм

30 градусів

HD, 134°C, 2.2 бар

Артикул: LPM-1801.5

Лапароскоп 5 мм

0 градусів

HD, 134°C, 2.2 бар

Артикул: LPM-1801.7

Лапароскоп 5 мм

30 градусів

HD, 134°C, 2.2 бар

Артикул: LPM-1801.8



Світловод

Довжина: 3 м

Діаметр: 4,5 мм

Артикул: LPM-0758.8

Адаптери на ендоскоп



Karl Storz
LAPOMED
LPM-0758.20



Olympus
Stryker
LPM-0758.19



Richard
Wolf
LPM-0758.18

Адаптери на світловод



Wolf
LPM-0758.15



Olympus
LPM-0758.16

Ретрактори лапароскопічні

Ретрактори лапароскопічні використовуються для захоплення та відведення тканин за межі операційного поля для роботи з анатомічними структурами, які розташовані поза такими тканинами.

Лапароскопічні ретрактори бувають лопатевими та по типу «голд фінгер». Лопатеві використовуються переважно для відведення петель кишківника або шлунка, а «gold finger» ретрактори для відведення тонких трубчастих структур (наприклад стравоходу під час пластики діафрагмальної киля), а також печінки.

За діаметром бувають 5 мм та 10 мм ретрактори.




Лопатеві ретрактори

Довжина: 330 мм



Ретрактори “Gold finger”

Довжина: 330 мм

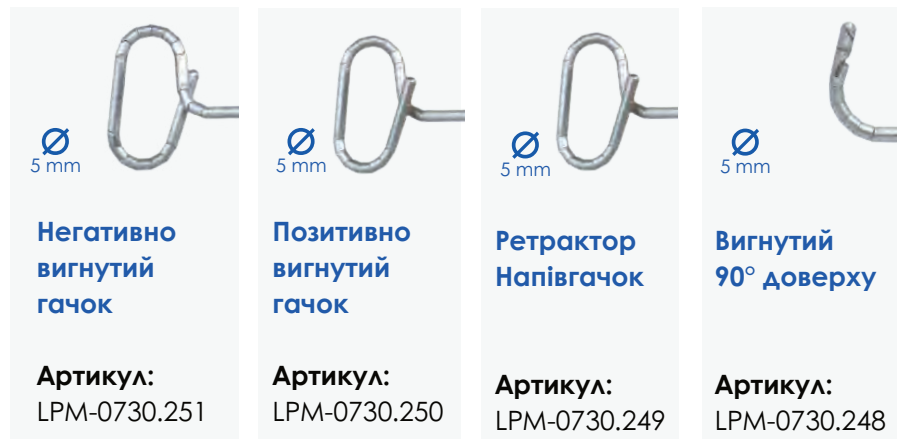


Трубки, штовхачі лігатур, маткові маніпулятори

Трубки лапароскопічні для аспірації та іригації необхідні для забору біологічних рідин з черевної порожнини та подачі інших рідин всередину неї. Розрізняють лапароскопічні трубки за типом механізму: важільний, кнопковий та інші, а також за можливістю повторного використання на багаторазові та одноразові.

Багаторазові трубки для аспірації та іригації

∅ 5 мм та 10 мм

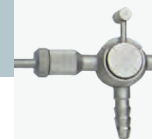

Трубка з **важільним** механізмом
в комплекті насадки 5 та 10 мм
Артикул: LPM-0705.1



Трубка з **кнопковим** механізмом
в комплекті насадки 5 та 10 мм
Артикул: LPM-0730.116

Одноразові трубки для аспірації та іригації




Ф5 мм x 330 мм
Артикул: LPM-1608.1
Ф10 мм x 330 мм
Артикул: LPM-1608.2
Ф5 мм x 450 мм
Артикул: LPM-1608.3
Ф10 мм x 450 мм
Артикул: LPM-1608.4

Штовхач лігатур




Штовхач лігатур
Ф5 мм x 330 мм
Артикул: LPM-0707.1

Маткові маніпулятори

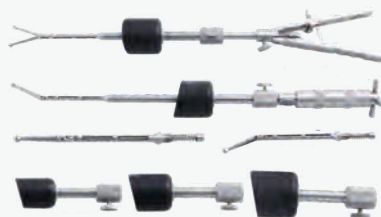

Маніпулятор
2 ручки, 6 голівок
Артикул:
LPM-0751.38

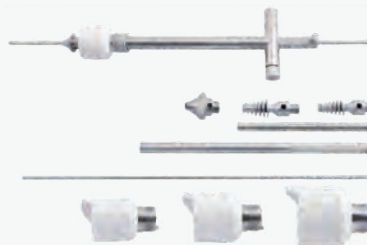

**Маніпулятор з 3-ма
керамічними голівками**
Артикул:
LPM-0751.38



**Канюля для
хромосальпінгографії**
Артикул:
LPM-0744.7

Ендобеги, щітки, рукави для камери

Для швидкої та якісної лапароскопії необхідні продумані та зручні аксесуари та витратні матеріали. Вся справа у деталях, яким ми приділяємо багато часу, щоб економити цей час та нерви під час вашої лапароскопії.

Ендобеги із системою подачі в черевну порожнину

Ø 10 мм



Одноразовий пакет для екстракції біологічного матеріала

Об'єм: 700 мл
Артикул: LPM-1606.12

Ендобеги без системи подачі



Одноразовий ендобег

Об'єм: 200 мл
Артикул: LPM-1606.18

Об'єм: 400 мл
Артикул: LPM-1606.19

Щітки для чистки тубусів лапароскопічних інструментів



Щітка багаторазова

Для тубусів: 5 мм
Артикул: LPM-0709.4



Щітка багаторазова

Для тубусів: 10 мм
Артикул: LPM-0709.5

Рукав для голівки камери/ендоскопа



Одноразовий рукав

Довжина: 3000 мм
Артикул: LPM-1609.4

Також в асортименті:

- Зшиваючі апарати
- Ендоскопічне обладнання
- Резектоскопи
- Гістери- та цистоскопи
- Артроскопи
- Сину-, ларинго- та отоскопи
- Гнучкі інструменти
- Та багато іншого



У нас цікаво в IG:
[@lapomed.ua](https://www.instagram.com/lapomed.ua)



ТОВ "ЛАПОМЕД" | LAPOMED LLC



+38 (048) 79-621-79

+38 (050) 399-49-55

(Дзвоніть з 10-00 до 17-00)



info@lapomed.ua

(пишіть у будь-який час)



65003, Україна, Одеса

вул. Чорноморського

козацтва 115

РОБИМО ПРОФЕСІЙНУ ЛАПАРОСКОПІЮ ДОСТУПНОЮ

<https://lapomed.ua>

