

- ОБЛАДНАННЯ
- ІНСТРУМЕНТИ
- ВИТРАТНІ
- КОМПЛЕКТИ

МИ РОБИМО

ЯКІСНУ ЖОРСТКУ ЕНДОСКОПІЮ

ДОСТУПНОЮ РАЗОМ З ВАМИ

- Лапароскопія
- Артроскопія
- Гістероскопія
- Цистоскопія
- Синускопія
- Ректоскопія
- Кольпоскопія



Про компанію «ЛАПОМЕД»

ЯКІСТЬ, ЯКУ ВИ ДАВНО ШУКАЛИ

Сьогодні, коли ринок медичних виробів розвивається дуже стрімко, у клієнтів з'являється нагальна потреба серед різноманіття товарів швидко знайти продукцію, що має необхідні характеристики, високу якість виготовлення, достатній гарантійний термін обслуговування та виконується у строк. Саме такі цілі ставить перед собою компанія для задоволення потреб клієнтів та успішне впроваджує їх у свої діяльності.



ШВИДКО ТА ПРОФЕСІЙНО

Не менш важливим за якість продукції є строк її поставки до клієнта та введення в експлуатацію у найкоротші строки. Це також є принциповим моментом у діяльності компанії. Станом на 2023 рік ТОВ «ЛАПОМЕД» змогла досягти мети доставляти, інсталиувати, вводити у експлуатацію ендоскопічні комплекси обладнання та інструментів протягом лише 1 дня.

КОНТРАКТНЕ ВИРОБНИЦТВО

Уся продукція ТОВ «ЛАПОМЕД» виготовляється за принципом OEM/OBL на виробничих лініях субпідрядників, що розташовані переважно у Китаї. При цьому наша компанія в сфокусована на контролі якості, належному зберіганні, дистрибуції та сертифікації медичних виробів.

ЗА 9 РОКІВ НАМ ВДАЛОСЬ:

- > 200 інсталяцій ендоскопічних стійок
- > 1000 задоволених клієнтів
- > 20 000 одиниць товару на складі

ОПТИМАЛЬНИЙ БАЛАНС

Ми завжди боремося за оптимальне ціноутворення на вигоду нашим клієнтам. Наша ціль - оптимальний баланс між ціною, функціональними можливостями та якістю продукції. Більш того, ціна на наші товари не просто включає вартість виготовлення, але й швидкий надійний сервіс, доставку до клієнта за місцем застосування, інструктаж, навчання лікарів.

НАШІ БАЗОВІ ПОСЛУГИ:

- Доставка по Україні
- Інсталяція обладнання
- Інструктаж персоналу
- Супровід операцій
- Гарантія до 2 років
- Підмінне обладнання

Зміст каталогу

Про компанію «ЛАПОМЕД»	2
Вступ.....	4
Системи візуалізації.....	5
Стаціонарні ендоскопічні камери	5
Портативні ендоскопічні камери	6
Освітлювачі ендоскопічні	7
Аksesуари для ендоскопічних камер та освітлювачів	8
Монітори ендоскопічні	9
Інсуфлятори CO2 лапароскопічні	10
Помпи ендоскопічні	11
Помпи іригаційні	11
Помпа лапароскопічна (аспіратор-іригатор)	12
Шейверні системи для артро/синускопії.....	13
Кольпоскопи.....	14
Приладові ендоскопічні стійки	15
Комплекти ендоскопічного обладнання (ендоскопічні стійки)	16

Вступ

Виготовляємо професійне обладнання для ендоскопічної хірургії та діагностики. Широкий асортимент кожного елементу ендоскопічної стійки дає можливість обирати різні комплектації, що потрібні саме Вам. В цьому каталозі викладені короткі відомості про ендоскопічне обладнання від виробника ТОВ «ЛАПОМЕД». У верхньому правому куті ми будемо залишати QR-коди для швидкого переходу на наш сайт у відповідний розділ для більш детального ознайомлення та замовлення товару.



Камери



Освітлювачі



Монітори



Приладові стійки



Помпи



Інсуфлятори



Шейвери



Кольпоскопи

Системи візуалізації

Стаціонарні ендоскопічні камери



Ендоскопічна камера – це основний елемент системи візуалізації, що виконує основні функції: отримання та обробка візуальної інформації з окуляра ендоскопа, передачі такої інформації на монітор та запис на USB накопичувач (за потреби).

Стаціонарні камери призначені для комплектування ендоскопічних систем операційних кімнат з постійною локацією. Найкраще потенціал таких систем розкривають монітори від 32 дюймів для Full HD та 4K системи та від 55" для 4K систем.

ЕНДОСКОПІЧНА КАМЕРА FULL HD



ЕНДОСКОПІЧНА КАМЕРА 4K



Артикул: LPM-0801.1

LPM-0801.2

Артикул: LPM-0801.7

LPM-0801.8

Сенсор: **1-CMOS 1/2.3" Sony**
Розподільність: 1920 * 1080 пікселів
Частота кадрів: 60 кадрів / секунду
Відео виходи: 3 x HDMI, 1 x S-Video
Дисплей: LCD 5 дюймів
Запис відео/фото: **Так + хмарне сховище**
Голівка камери: Zoom 18-32 мм

1-CMOS 1/2.8" Sony
1920 * 1080 пікселів
60 кадрів / секунду
3 x HDMI, 1 x S-Video
LCD 5 дюймів
Так
Zoom 18-32 мм

Сенсор: **1-CMOS 1/1.8"**
Розподільність: 1920 * 1080 пікселів
Частота кадрів: 60 кадрів / секунду
Відео виходи: **DVI-D, HDMI 2.0**
Дисплей: **LCD 5 дюймів**
Запис відео/фото: Так
Голівка камери: IPX8, zoom 14-28 мм

1-CMOS 1/2.5" Sony
1920 * 1080 пікселів
60 кадрів / секунду
DVI-D, HDMI 2.0
LCD 5 дюймів
Так + хмарне сховище
IPX8, zoom 14-28 мм

Комплектація:

Блок управління, голівка камери, зум-адаптер 18-32 мм (на голівці камери), кабель живлення, HDMI кабель 2м, SDI кабель 2 м.

Комплектація:


Блок управління, голівка камери, зум-адаптер 14-28 мм (на голівці камери), кабель живлення, HDMI (версія 2.0) кабель 2м, SDI кабель 2 м.

*** Онлайн ендоскопічний термінал з доступом до хмарного сервісу i.lapomed.ua – надається в комплекті для ендоскопічних камер: LPM-0801.1 та LPM-0801.8**

Портативні ендоскопічні камери

Ендоскопічна камера – це основний елемент системи візуалізації, що виконує основні функції: отримання та обробка візуальної інформації з окуляра ендоскопа, передачі такої інформації на монітор та запис на USB накопичувач (за потреби).

Портативні камери призначені для комплектування ендоскопічних систем для операційних кімнат та маніпуляційних кабінетів маленької площі або при необхідності переміщувати ендоскопічну систему між приміщеннями. Зазвичай портативні системи обладнання вбудованими моніторами до 22 дюймів.

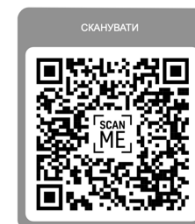

ЕНДОСКОПІЧНА КАМЕРА ТИПУ МОНОБЛОК



ЕНДОСКОПІЧНА КАМЕРА ТИПУ LAPTOP



Артикул:	LPM-0802.5	LPM-0802.2	Артикул:	LPM-0802.4	LPM-0804.3
Сенсор:	1 CMOS 1/2.8" Sony	1 CMOS 1/2.8" Sony	Сенсор:	1 CMOS 1/2.8" Sony	1 CMOS 1/2.8" Sony
Розподільність:	1920 * 1800 пікселів	1920 * 1080 пікселів	Розподільність:	1920 * 1080 пікселів	1920 * 1080 пікселів
Частота кадрів:	60 кадрів / секунду	60 кадрів / секунду	Частота кадрів:	60 кадрів / секунду	60 кадрів / секунду
Відео виходи:	DVI, HDMI, CVBS	3 x HDMI, 1 x S-Video	Відео виходи:	DVI-D, HDMI, CVBS	DVI-D, HDMI, CVBS
Дисплей:	LCD 15 дюймів	LCD 22 дюймів	Дисплей:	LCD 19 дюймів	LCD 19 дюймів
Освітлювач:	80 Вт LED	80 Вт LED	Освітлювач:	35 Вт LED	35 Вт LED
Запис відео/фото:	Так	Так	Запис відео/фото:	Так	Так
Голівка камери:	Fix 14 мм	Zoom 18-32 мм	Голівка камери:	IPX8, zoom 14-28 мм	IPX8, zoom 14-28 мм
Комплектація:	Блок управління, голівка камери, оптичний адаптер, кабель живлення, відео кабель 2м.		Комплектація:	Блок управління, голівка камери, оптичний адаптер, кабель живлення, відео кабель 2м.	

Освітлювачі ендоскопічні

Ендоскопічний освітлювач – це важливий елемент системи візуалізації що виконує основні функції: отримання та обробка візуальної інформації з окуляра ендоскопа, передача такої інформації на монітор та запис на USB накопичувач (за потреби).

ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ДЛЯ FULL HD СИСТЕМ



Артикул: LPM-0803.1

Світловий потік: 1500 Люмен
Кольоровий індекс: ≥ 90
Спектральний діапазон: 400-700 нм
Споживна потужність: 80 Вт
Кольорова температура: 5000-7000 К
Тип входу для світловода: Wolf (товстий)
Режим очікування: Наявний
Ресурс LED модуля: 50 000 годин
Тип модуля: Світлодіодний (LED)

Комплектація: Блок управління,
світловід оптичолоконний 3 м

ЕНДОСКОПІЧНИЙ ОСВІТЛЮВАЧ ДЛЯ 4K СИСТЕМ



Артикул: LPM-0803.5

Світловий потік: 1500 Люмен
Кольоровий індекс: ≥ 90
Спектральний діапазон: 400-700 нм
Споживна потужність: 80 Вт
Кольорова температура: 5000-7000 К
Тип входу для світловода: Wolf (товстий)
Режим очікування: Наявний
Ресурс LED модуля: 50 000 годин
Тип модуля: Світлодіодний (LED)

Комплектація: Блок управління,
світловід оптичолоконний 3 м

Акcesуари для ендоскопічних камер та освітлювачів

Доступні та наявні акcesуари до ендоскопічного обладнання є важливим компонентом стабільної роботи операційної бригади. Ви завжди можете замовити необхідні компоненти, основні з яких вказані в цьому каталозі (більше інформації ви знайдете на нашому сайті: <https://lapomed.ua> або відскануйте QR-код справа за допомогою камери свого телефону щоб перейти у відповідний розділ).



Zoom-адаптер (LPM-0804.8)

Надзвичайно зручний та необхідний за сучасними мірками акcesуар для ендоскопічних камер, який дозволяє змінювати фокусну відстань від 18 мм до 35 мм, що забезпечує максимальне оптичне 2-кратне наближення (2X).

Застосування такого зум оптичного адаптера дає змогу працювати жорсткими ендоскопами різного діаметра від 2,9 мм до 10 мм у діаметрі формуючи комфортне для хірурга зображення на моніторі у формі «кола», «неповного кола» або «повного кадру (на весь екран)».

У всіх ендоскопічних Full HD та 4K системах від ЛАПМЕД в базовий комплект включено саме такий оптичний адаптер із функцією zoom.

Світловод (оптоволоконний кабель)

В базовий комплект до усіх освітлювачів та камер із вбудованими освітлювачами ЛАПМЕД включено 3-метровий оптоволоконний кабель діаметром 4,5 мм з 2 перехідниками для різних типів освітлювачів.

За бажанням можна замовити світловод іншої довжини, можливість автоклавувати. Усі варіанти можна знайти на нашому сайті за QR-кодом вище на цій сторінці.

Адаптери (перехідники) для світловодів

Ці акcesуари необхідні для підключення та адаптації світловодів та ендоскопів з освітлювачами (джерелами світла) від різних виробників. На нашому сайті ви можете підібрати адаптери для сторони ендоскопа та сторони освітлювача, що мають в свою чергу усі світловоди.

Монітори ендоскопічні

Ендоскопічні медичні монітори є невід'ємною складовою будь-якої ендоскопічної стійки. Основними відмінностями від побутових та комп'ютерних моніторів є наявність захисного скла на передній панелі пристрою, підвищена яскравість та природна передача кольорів для точної діагностики.

ЕНДОСКОПІЧНИЙ МОНІТОР 24" FULLHD ТА 32" 4K



ЕНДОСКОПІЧНИЙ МОНІТОР 55" 4K



Артикул: LPM-0906		LPM-0905	Артикул: LPM-0907	
Матриця: 24" TFT (IPS)		32" TFT (IPS)	Матриця: 55" TFT (IPS)	
Захист передньої панелі: Захисне скло		Захисне скло	Захист передньої панелі: Захисне скло	
Розподільна здатність: 1920 x 1080 пікселів		3840 x 2160 пікселів	Розподільна здатність: 3840 x 2160 пікселів	
Співвідношення сторін: 16 : 9		16 : 9	Співвідношення сторін: 16 : 9	
Максимальна яскравість: 400 кд/м2		700 кд/м2	Максимальна яскравість: 600 кд/м2	
Контраст: 1200 : 1		1200 : 1	Контраст: 1200 : 1	
Бітність (кількість кольорів): 8 біт (16.7 млн.)		10 біт (1073,7 млн.)	Бітність (кількість кольорів): 10 біт (1073,7 млн.)	
Споживна потужність: 100 Вт (12 В x 8,5 А)		100 Вт	Споживна потужність: 120 Вт (12 В x 10 А)	
Інтерфейси (входи): HDMI, DVI, VGA, CVBS, S-Video		HDMI, DP-4K	Інтерфейси (входи): Px1, HDMI 2.0x1, HDMI 1.4x3	
Час відклику: 8 мс		8 мс	Час відклику: 8 мс	
Комплектація:		Дисплей, підставка настільна, кабель HDMI 2 м, кабель живлення 2 м	Комплектація:	
			Дисплей, кабель HDMI 2 м, кабель живлення 2 м	

Інсуфлятори CO₂ лапароскопічні

Інсуфлятор CO₂ – це обов'язковий елемент лапароскопічної стійки, основною задачею якого є подача та підтримання певного тиску (зазвичай близько 12 мм.рт.ст.) у черевній порожнині для створення необхідного пневмоперитонеуму. Опційно інсуфлятори можуть підігрівати вуглекислоту перед подачею у живіт.

ІНСУФЛЯТОР CO ₂ 30 Л/БЕЗ ПІДІГРІВУ		ІНСУФЛЯТОР CO ₂ 40 Л/З ПІДІГРІВОМ	
 		  	
Артикул:	LPM-0504	Артикул:	LPM-0505
Тип управління:	Кнопки + цифрові дисплеї	Тип управління:	Сенсорний дисплей 7 дюймів
Швидкість подачі газу (max):	30 літрів/хвилину	Швидкість подачі газу (max):	40 літрів/хвилину
Діапазон тиску:	5-25 мм. рт. ст.	Діапазон тиску:	5-25 мм. рт. ст.
Крок регулювання тиску:	1 мм. рт. ст.	Крок регулювання тиску:	1 мм. рт. ст.
Крок регулювання швидкості:	10 літрів/хвилину	Крок регулювання швидкості подачі:	< 10 л/хв - 1 літр/хв, > 10 л/хв – 5 л/хв.
Підігрів газу:	Відсутній	Підігрів газу:	Присутній до 37°C
Комплектація: Блок управління, набір силіконових трубок з адаптерами, редуктор для підключення до балону, шланг високого тиску 3 м.			



Набір трубок для інсуфлятора LAPOMED™

(артикул: LPM-0509.12)
Тільки для моделі інсуфлятора LPM-0505



Набір трубок для інсуфлятора LAPOMED™

(артикул: LPM-0509.1)
Тільки для моделі інсуфлятора LPM-0504

Помпи ендоскопічні

Помпи іригаційні

Ендоскопічна помпа – це насос призначений для подачі та (в деяких випадках) для забору рідин під час ендоскопічної операції/маніпуляції.

Іригаційна ендоскопічна помпа – це помпа для подачі та підтримки необхідного тиску у порожнистому органі під час артроскопії, гістероскопії та цистоскопії. Для літотрипсії такі помпи додатково обладнані спеціальною системою активної аспірації для видалення фрагментів подрібнених каменів (тільки у моделі LPM-0501). В решті випадків забір рідини відбувається пасивно.

ПОМПА ІРИГАЦІЙНА АРТРО/ГІСТЕРО/ЦИСТОСКОПІЧНА



Артикул: LPM-0502

Тип управління: Кнопки + цифрові дисплеї
Швидкість подачі рідини: **100-1000 мл/хвилину**
Діапазон тиску подачі: **15-400 мм.рт.ст.**
Тип механізму: Роторний
Забір рідини: **Відсутній**

Комплектація: Блок управління, набір силіконових трубок з адаптерами.

ПОМПА ІРИГАЦІЙНА РЕНОСКОПІЧНА



Артикул: LPM-0501

Тип управління: Сенсорний 7-дюймовий дисплей
Швидкість подачі: **10-800 мл/хвилину**
Діапазон тиску подачі: **10-150 мм.рт.ст.**
Спеціальні режими: Реноскопічний для літотрипсії (20 мм.рт.ст.)
Діапазон тиску забору: **-10 до -400 мм.рт.ст**

Комплектація: Блок управління, набір силіконових трубок з адаптерами, 2 пластикових ємності по 2,5 л кожна для подачі.

Помпа лапароскопічна (аспіратор-іригатор)

Лапароскопічна помпа – це прилад призначений для подачі та забору рідини під час лапароскопії. На відміну від іригаційних pomp з активною аспірацією лапароскопічна помпа є автоматичною, а отже регулює швидкість відповідно до параметрів тиску та похибка регулювання тиску є більшою. Відповідно використовувати лапароскопічні помпи можна використовувати лише при лапароскопії.

ПОМПА ЛАПАРОСКОПІЧНА	Артикул:	LPM-0511
	Тип управління: Кнопки + цифрові дисплеї Діапазон тиску забору: -50 кПа Діапазон тиску подачі: +50 кПа Тип механізму: Електромеханічний Кронштейн для колби: Наявний Тип роботи: Автоматичний (без педалі)	
	Комплектація: Блок управління, набір силіконових трубок з адаптерами, колба пластикова для забору рідини 2 літра.	

Аксесуари для ендоскопічних pomp

Компанія ЛАПОМЕД тримає на складі широкий спектр аксесуарів для ендоскопічного обладнання в тому числі і для ендоскопічних pomp. Ви з легкістю можете обрати та замовити необхідний для себе аксесуар на нашому сайті lapomed.ua або за QR кодом справа.

	Набори силіконових трубок LPM-0509.8 для помпи LPM-0502 тип А LPM-0509.10 для помпи LPM-0502 тип В LPM-0509.6 для помпи LPM-0511		Адаптер Люера LPM-0712.16 без краника LPM-0757.33 з краником
	Голка для пляшок/пакетів з рідиною LPM-0509.7 для помпи LPM-0511		Пляшка для забору рідини LPM-0509.9 для помпи LPM-0511

Шейверні системи для артро/синускопії


Шейверна система (шейвер) – призначений для зрізання м'яких та твердих тканин під час артроскопії або синускопії шляхом обертання ножа необхідної форми з максимальною швидкістю від 4000 до 8000 обертів на хвилину. Корисний інструмент для швидкого та ефективного оперативного втручання на суглобах та носовій порожнині.

ШЕЙВЕРНА СИСТЕМА 4000 ОБ/ХВИЛНУ		ШЕЙВЕРНА СИСТЕМА 8000 ОБ/ХВИЛИНУ	
			
Артикул:	LPM-0512	Артикул:	LPM-0514
Тип управління:	Кнопки + цифрові дисплеї	Тип управління:	Сенсорний 7-дюймовий дисплей
Максимальна швидкість:	4000 обертів на хвилину	Максимальна швидкість:	8000 обертів на хвилину
Швидкість забору рідини:	800 мл/хвилину	Швидкість забору рідини:	800 мл/хвилину
Ножі в комплекті:	5 ножів різної форми	Ножі в комплекті:	3 ножа різної форми
Режими роботи:	Маятниковий та звичайний	Режими роботи:	Маятниковий та звичайний
Комплектація: Блок управління, ручка з мотором без щіток, педаль з кабелем, ніж прямий Ф4 мм, ніж шарик Ф4 мм, ніж вигнутий Ф4 мм, ніж без зубчиків Ф4 мм, ніж грубий Ф4 мм, трубка для аспірації, колба для аспірації.		Комплектація: Блок управління, ручка з мотором без щіток, педаль з кабелем, ніж сферичний Ф4 мм, ніж зубчастий Ф4 мм, ніж гладкий Ф4 мм, трубка для аспірації, колба для аспірації.	

	Ножі для шейвера 0512: Прямий, шарик, вигнути, без зубчиків, грубий		Ножі для шейвера 0514: Сферичний, зубчастий, гладкий
Всі форми ножів можна замовити прямими або вигнутими під кутом.			

Кольпоскопи

Кольпоскоп – ендоскопічне обладнання для дослідження шийки матки. Кольпоскопи бувають стаціонарного типу та портативного типу формату laptop. За розподільною здатністю також розрізняють SD (standard definition) та HD (high definition).

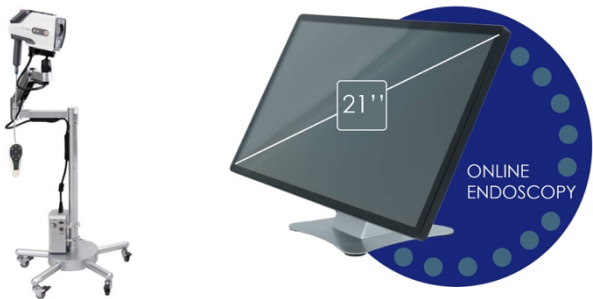КОЛЬПОСКОП СТАЦІОНАРНИЙ FULL HD		КОЛЬПОСКОП ПОРТАТИВНИЙ SD	
			
Артикул:	LPM-0805.2	Артикул:	LPM-0514
Розподільча здатність:	1920 x 1080 пікселів	Розподільча здатність:	576 x 720 пікселів
Сенсор:	1/2.8" SONY	Сенсор:	1/4" SONY
Збільшення:	20X оптичне та 12X Цифрове	Збільшення:	20X оптичне та 12X цифрове
Робоча дистанція:	30-50 см	Робоча дистанція:	30-50 см
Відео інтерфейси:	SD	Відео інтерфейси:	CVBS
Монітор:	22"	Монітор:	15"
Система запису на USB:	Через ПК	Система запису на USB:	Вбудована. Фото та відео
Вбудований освітлювач:	LED (1200 Лк)	Вбудований освітлювач:	LED (1200 Лк)
Комплектація:	Стійка для камери кольпоскопа, стійка для робочої станції, робоча станція (ПК) з монітором, пульта керування камерою кольпоскопа, процесор камери кольпоскопа, клавіатура, мишка	Комплектація:	Блок управління кольпоскопом в форматі laptop з вбудованим монітором та системою запису фото та відео, камера кольпоскопа, штатив для камери кольпоскопа, пульт керування камерою кольпоскопа.

*** Хмарне програмне забезпечення входить до комплекту, ТОВ ЛАПОМЕД надає безкоштовний доступ до Онлайн ендоскопічної платформи усім лікарям безкоштовно.**

Приладові ендоскопічні стійки

Приладова ендоскопічна стійка – необхідна для зручного розташування усіх компонентів ендоскопічного комплексу та підключення обладнання між собою та мережі. Стійки Лапомед виготовляються з алюмінію та пластику підвищеної міцності з антистатичним покриттям для зменшення ризику пошкодження обладнання.

СТІЙКА ДЛЯ СИСТЕМ З МОНІТОРОМ ДО 24"		СТІЙКА ДЛЯ СИСТЕМ З МОНІТОРОМ ДО 32"		СТІЙКА ДЛЯ СИСТЕМ З МОНІТОРОМ ДО 55"	
					
Артикул:	LPM-1004	Артикул:	LPM-1003	Артикул:	LPM-1006
Кількість полиць:	1 штука	Кількість полиць:	4 штуки	Кількість полиць:	3 штуки
Кількість поверхонь:	2 штуки	Кількість поверхонь:	5 штуки	Кількість поверхонь:	3 штуки
Гальма:	На 2 колесах	Гальма:	На 2 колесах	Гальма:	На 2 колесах
Обертання 360°:	Всі 4 колеса	Обертання 360°:	Всі 4 колеса	Обертання 360°:	Всі 4 колеса
Кріплення VESA:	Наявне	Кріплення VESA:	Наявне	Кріплення VESA:	Наявне
Комплектація: Стійка приладова у зібраному стані, кронштейн для монітора з кріпленням VESA, тримач для кабелів та голівки камери.		Комплектація: Стійка приладова у зібраному стані, кронштейн для монітора з кріпленням VESA, тримач для кабелів та голівки камери.		Комплектація: Стійка приладова у зібраному стані, кронштейн для монітора з кріпленням VESA, тримач для кабелів та голівки камери.	

Комплекти ендоскопічного обладнання (ендоскопічні стійки)

Наша компанія 9 рік спеціалізується на комплектуванні професійних ендоскопічних операційних кімнат та діагностичних кабінетів. Спираючись на власний досвід та зворотній зв'язок з клієнтами ми пропонуємо готові комплекти ендоскопічного обладнання для наступних напрямків:

- Лапароскопія
- Цистоскопія
- Гістероскопія
- Артроскопія
- Кольпоскопія
- Ректоскопія
- Синускопія
- Отоскопія
- Інші напрямки жорсткої ендоскопії



Наша компанія розробила та активно впроваджує абсолютно новий напрямок в сучасній ендоскопії – онлайн доступ через наші термінали та хмарний сервіс, що дає змогу підключатись онлайн до операцій в будь-якій точці України – це i.laromed.ua

Ви можете завжди ознайомитись з актуальними рекомендованими комплектами на нашому сайті laromed.ua або відсканувавши QR-код справа за допомогою камери свого мобільного телефона.

- **Обладнання експертного класу**
- **Гарантія 2 роки від виробника в Україні**
- **Сервісний центр в Україні**
- **Парк підмінного обладнання на час сервісу**
- **Професійні консультації**
- **Сертифікована продукція**